

TROIS NIVEAUX DE PROTECTION POUR AVOIR UNE PEAU SAINÉ

L'anneau protecteur cutané Dansac TRE est plus performant grâce à ses trois types de protection : adhérence, absorption et équilibre du pH, il favorise la santé naturelle de la peau.



Adhérence

Conçu pour assurer une fermeture sûre et flexible de la stomie, afin de protéger la peau contre les sécrétions et de faciliter le retrait après application.



Absorption

Il aide à absorber l'excès d'hydratation pour maintenir l'équilibre naturel de la peau, sans lui faire perdre sa forme ni son adhérence.



Équilibre du pH

Conçu pour neutraliser les effets nocifs des enzymes digestives sur la peau.

DESCRIPTION	TAILLE DE L'OUVERTURE	RÉF.	PHARMACODE	COND.
TRE, anneau protecteur cutané, ouverture centrée	18 mm	072-48	732 47 92	10
TRE, anneau protecteur cutané, ouverture excentrée	20 mm	071-20	732 47 57	30
TRE, anneau protecteur cutané, ouverture excentrée	30 mm	071-30	732 47 63	30
TRE, anneau protecteur cutané, ouverture excentrée	40 mm	071-40	732 47 86	30

APPLICATIONS POSSIBLES DES ANNEAUX PROTECTEUR CUTANÉS AVEC OUVERTURE EXCENTRÉE



Anneau protecteur cutané
Dansac TRE

© 2018 Dansac GmbH. Le logo Dansac et Dansac TRE sont des marques déposées de Dansac A/S.

P02-74-400

Dansac • Bernstrasse 388 • 8953 Dietikon

Tél. 044 730 50 10 • E-mail: info@dansac.ch

www.dansac.ch

www.estoma.ch


dansac 
Dedicated to Stoma Care


DANSAC TRE SEAL


dansac 
Dedicated to Stoma Care

Diverses possibilités de placement

- Apporte sécurité et protection au bon endroit
- Peut être utilisé en postopératoire pour éviter le contact avec la plaie chirurgicale
- L'anneau protecteur cutané peut être tourné afin d'accroître la protection de la peau dans les zones de plis ou de rétractions
- Pour optimiser l'ajustement entre la stomie et la peau

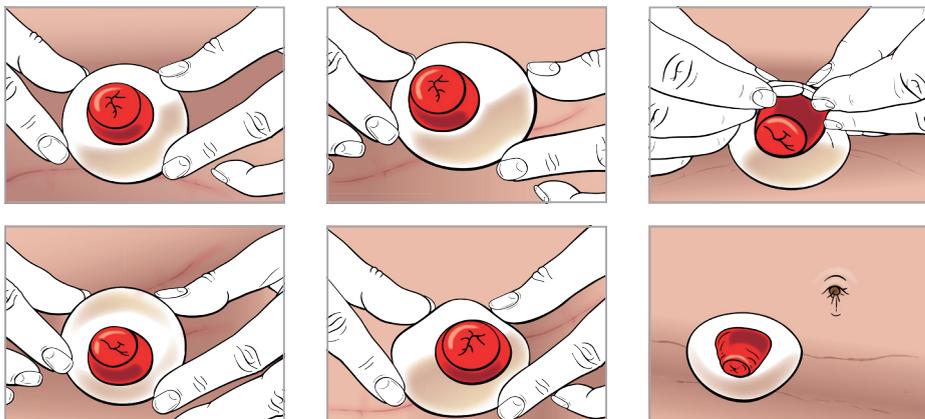

Pour bien entourer la stomie

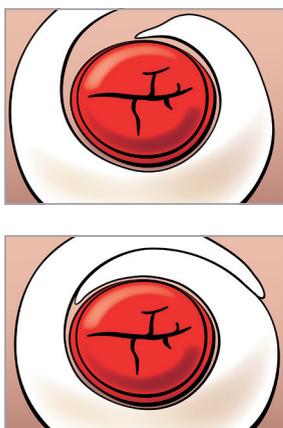

- Convient aux systèmes de stomie dont l'extrémité est plus grande que la base de la stomie, par exemple pour une stomie latérale (double conduit)
- Ouvrez l'anneau protecteur cutané à son point le plus étroit et placez-le autour de la base de la stomie; assurez-vous que les deux extrémités de l'anneau protecteur cutané se chevauchent (voir dessins)
- La mise en place de l'anneau protecteur cutané à proximité d'une lésion muco-cutanée peut favoriser la protection de la peau péristomiale

Éventail d'applications

- Utilisable sur les poches d'un seul tenant
- Peut être placé sur la protection cutanée ou directement sur la peau péristomiale



Utilisation directement sur la peau péristomiale.

Une grande adaptabilité

- Étirable et modelable en fonction de la personne
- Compense les inégalités autour de la stomie
- Favorise un meilleur ajustement de la protection cutanée

